

Absorin Pants

Voor licht tot zeer zwaar urineverlies




Absorin Pants is een absorberend verband en broekje in één, voor zowel mannen als vrouwen. Het is te dragen als normaal ondergoed en daarmee zeer geschikt voor actieve, zelfredzame mensen die extra bescherming wensen. Ook voor de wat grotere tot obese gebruiker is het broekje eenvoudig aan te trekken.


absorin[®]
professionele continenzorg

Producteigenschappen

Absorin Pants

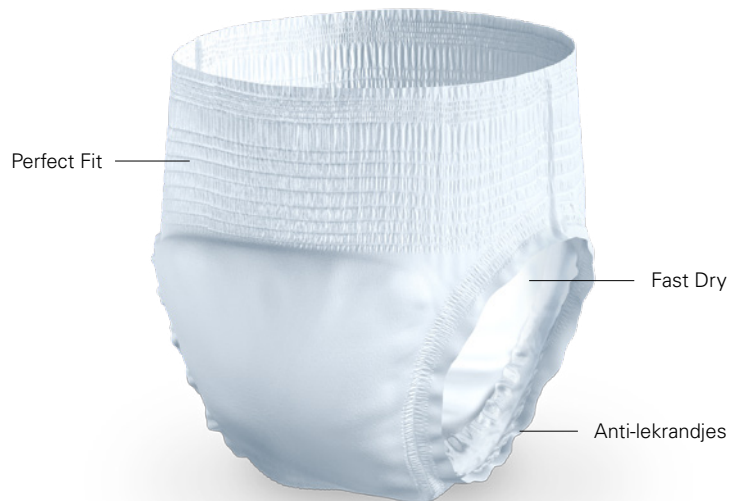

Perfect Fit

Door het anatomisch gevormde verband en het elastische materiaal sluit het product onder alle omstandigheden perfect aan op het lichaam.

Cottonfeel & Ademend


De Cottonfeel buitenlaag voelt zacht als katoen en heeft een ademend effect. Zónder dat het vocht doorlaat. Het zacht aflopend absorptiekussen voorkomt drukkplekken en zorgt voor extra draagcomfort.

Fast Dry Concept

Alle producten van Absorin zijn samengesteld volgens het Fast Dry Concept. Dankzij de opbouw in 5-lagen wordt de urine snel opgenomen, blijft de huid droog en wordt lekkage voorkomen. Deze unieke samenstelling biedt de gebruiker discretie, comfort en zekerheid.

Anti-lekrandjes

Speciale vochtwerende anti-lekrandjes zorgen dat grote hoeveelheden urine binnen het verband blijven. Ook bij dunne ontlasting voorkomen de anti-lekrandjes lekkage.

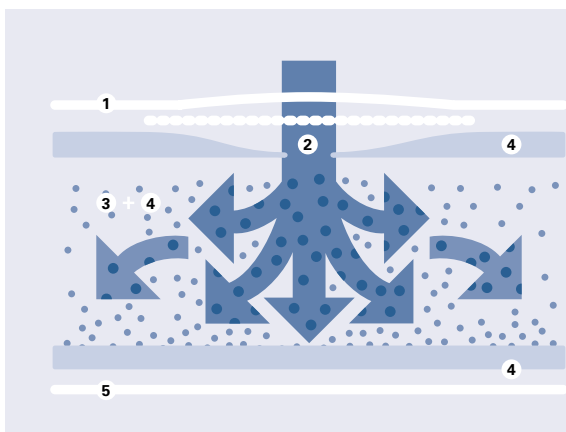

De unieke vijf-lagenstructuur van Absorin

1. **Nonwoven toplaag**; zacht en comfortabel voor de huid en geeft, na urineverlies, direct een droog gevoel.
2. **Opnamelaag (acquisitielaag)**; zorgt voor een optimale opname en transport van de urine naar het super-absorberende poeder in de kern van het product.
3. **Super absorberend poeder (SAP)**; zachte kristallen die de urine volledig insluiten en de geur neutraliseren.
4. **Zachte absorberende vezels**; geven de benodigde structuur aan het verband.
5. **Cottonfeel buitenlaag**; laat geen vocht door, geeft een ademend effect en voelt zacht als katoen.

Assortiment

Elke cliënt en elke zorgsituatie is anders. De verschillen zitten vaak in de details: de juiste maatvoering, een hogere absorptiecapaciteit of handige extra's voor nog meer gebruiksgemak. Het uitgebreide assortiment Absorin Pants biedt dit allemaal.

Gebruik

Zorg dat u altijd de juiste maatvoering en absorptiecapaciteit van Absorin Pants gebruikt. Met behulp van het Absorin meetlint kunt u de heupomvang bepalen en het juiste product selecteren.

Licht tot matig urineverlies:

Absorin SlimFit

Matig urineverlies:

Absorin Pant Plus

Zwaar urineverlies:

Absorin Pant Fit

Zeer zwaar urineverlies:

Absorin Pant Super

Absorin Pants is verkrijgbaar in 13 verschillende absorptiecapaciteiten en varianten voor dag- en/of nachtgebruik.

| Artikel nr. | Omschrijving | Heupomvang | Absorptie | Inhoud tas | Inhoud doos | ZI-nummer |
|-------------|------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|
| 3014808 | Pant Slimfit M 1230 | tot 120 cm | 800 ml | 14 st. | 8 x 14 st. | 15446743 |
| 3014820 | Pant Slimfit L 1240 | tot 145 cm | 800 ml | 14 st. | 8 x 14 st. | 15446751 |
| 3014412 | Pant Plus XS 10511205 | tot 55 cm | 1.250 ml | 20 st. | 4 x 20 st. | 15936872 |
| 3014806 | Pant Plus M 1225-A | tot 120 cm | 1.400 ml | 14 st. | 8 x 14 st. | 15787001 |
| 3014816 | Pant Plus L 1235-A | tot 145 cm | 1.400 ml | 14 st. | 8 x 14 st. | 15787028 |
| 3014822 | Pant Plus XL 1245-A | tot 165 cm | 1.500 ml | 14 st. | 4 x 14 st. | 15787036 |
| 3014416 | Pant Fit S 10511315 | tot 90 cm | 1.500 ml | 14 st. | 8 x 14 st. | 15903745 |
| 3014417 | Pant Fit M 10511325 | tot 120 cm | 1.900 ml | 14 st. | 8 x 14 st. | 15903753 |
| 3014418 | Pant Fit L 10511335 | tot 145 cm | 2.000 ml | 14 st. | 8 x 14 st. | 15903761 |
| 3014419 | Pant Fit XL 10511345 | tot 170 cm | 2.050 ml | 14 st. | 8 x 14 st. | 15903788 |
| 3014413 | Pant Super M 10511275 | tot 105 cm | 2.300 ml | 18 st. | 4 x 18 st. | 15903931 |
| 3014414 | Pant Super L 10511285 | tot 130 cm | 2.300 ml | 16 st. | 4 x 16 st. | 15903958 |
| 3014415 | Pant Super XL 10511295 | tot 165 cm | 2.350 ml | 12 st. | 4 x 12 st. | 15903966 |

Wij helpen u graag met een deskundig advies

Heeft u na het lezen van de informatie nog inhoudelijke vragen? Wilt u een advies op maat voor (een van) uw cliënt(en)? Of wilt u dat wij langskomen voor het geven van aanleginstructies? Neem dan contact op met onze Customer Service.

Zorgprofessionals

Zorgverleners, apothekers, thuiszorgmedewerkers, (wijk)verpleegkundigen en artsen kunnen iedere werkdag van 08.15 tot 16.45 uur telefonisch contact opnemen via 0186 - 63 44 00.

Consumenten

Voor consumenten is er iedere werkdag van 11.00 tot 12.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur een telefonisch spreekuur met onze verpleegkundig adviseurs. U kunt hiervoor ook een afspraak maken via het gratis telefoonnummer 0800 - 022 82 82 of door een e-mail sturen naar informatielijn@mediqmedeco.nl.

Kijk ook op www.medbis.nl

U kunt de productinformatie van de Absorin Pants ook nalezen op onze website. Deze vindt u op www.medbis.nl, onderaan de pagina van het product van uw keuze.

Mediq Medeco

Alexander Flemingstraat 2
3261 MA Oud-Beijerland

Postbus 1555
3260 BB Oud-Beijerland

T. +31(0) 186 - 63 44 00
F. +31(0) 186 - 61 68 93

Absorin is een merk van Medeco B.V. - www.absorin.nl

1201018 | Druk- en zetfouten voorbehouden. Mediq Medeco behoudt zich te allen tijde, het recht voor haar producten en assortiment te wijzigen.


professionele continenzorg