

bestelinformatie

Kliniderm foam silicone

ZI NR.	REF NR.	MAAT	VER-PAKKING	OVERDOOS
Zonder kleefrand				
15998541	40514823	5x5 cm	5 stuks	100 stuks
15998568	40514824	10x10 cm	5 stuks	100 stuks
15998576	40514825	15x15 cm	5 stuks	100 stuks
15998584	40514826	10x20 cm	5 stuks	100 stuks
15998592	40514827	20x20 cm	5 stuks	100 stuks
Met kleefrand				
15998606	40514828	7,5x7,5 cm	5 stuks	100 stuks
15998614	40514829	10x10 cm	5 stuks	100 stuks
15998622	40514830	12,5x12,5 cm	5 stuks	100 stuks
15998630	40514831	15x15 cm	5 stuks	100 stuks
15998649	40514832	10x20 cm	5 stuks	100 stuks
15998657	40514833	10x30 cm	5 stuks	100 stuks
15998665	40514834	15x20 cm	5 stuks	100 stuks

Kliniderm foam silicone lite

ZI NR.	REF NR.	MAAT	VER-PAKKING	OVERDOOS
Zonder kleefrand				
15998673	40514810	6x8,5 cm	5 stuks	100 stuks
15998681	40514811	10x10 cm	5 stuks	100 stuks
15998703	40514812	15x15 cm	5 stuks	100 stuks
15998711	40514813	20x50 cm	4 stuks	80 stuks
Met kleefrand				
15998738	40514814	4x5 cm	10 stuks	100 stuks
15998746	40514815	5x12,5 cm	5 stuks	100 stuks
15998754	40514816	7,5x7,5 cm	5 stuks	100 stuks
15998762	40514817	10x10 cm	5 stuks	100 stuks
15998770	40514818	15x15 cm	5 stuks	100 stuks



FW183005 Druk- en zetfouten voorbehouden. Mediq Medeco behoudt zich, te allen tijde, het recht voor haar producten en assortiment te wijzigen.

KLINION®

kliniderm foam silicone



pijnloze verbandwisselingen met kliniderm foam silicone

Dit is waar wij voor werken

Iedere dag doen we bij Mediq Medeco ons uiterste best om zorgprofessionals te ondersteunen bij het bieden van de juiste zorg en zetten we ons in om de zorg betaalbaar te houden. Klinion Kliniderm geavanceerde wondproducten sluiten naadloos aan op deze visie. Alle producten onderscheiden zich door de combinatie van functionaliteit, comfort en een scherpe prijsstelling. Zo ook de nieuwe Kliniderm foam silicone.

kliniderm foam silicone

Absorberend schuimverband met zachte siliconen wondcontactlaag.


Kenmerken

- Beschermt de omliggende huid
- Eenvoudig (opnieuw) aan te brengen
- Ondersteunt vochtige wondbehandeling
- Patiënt kan douchen met het verband
- Huidvriendelijke maar stevige fixatie
- Minder pijn bij verbandwisseling
- Comfortabel voor de patiënt


Indicaties

Kliniderm siliconen schuimverbanden zijn geschikt voor de behandeling van verschillende typen wonden zoals:

- Veneuze en arteriële ulcera
- Diabetische voetulcera
- Postoperatieve wonden
- Schaafwonden en andere traumatische wonden
- Let op: Kliniderm foam silicone mag ook op geïnfecteerde wonden worden toegepast mits de wondinfectie tegelijkertijd wordt behandeld volgens de daarvoor geldende richtlijnen.

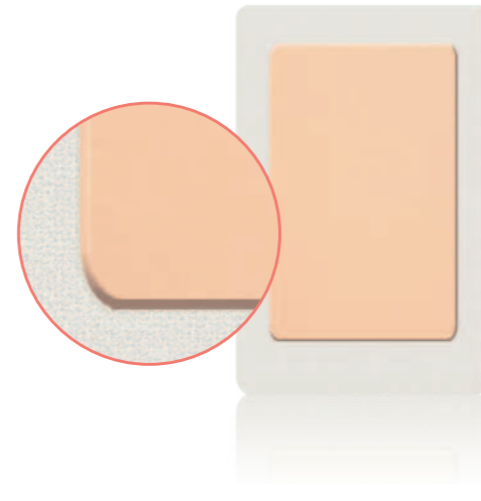

het verband is opgebouwd uit 3 lagen

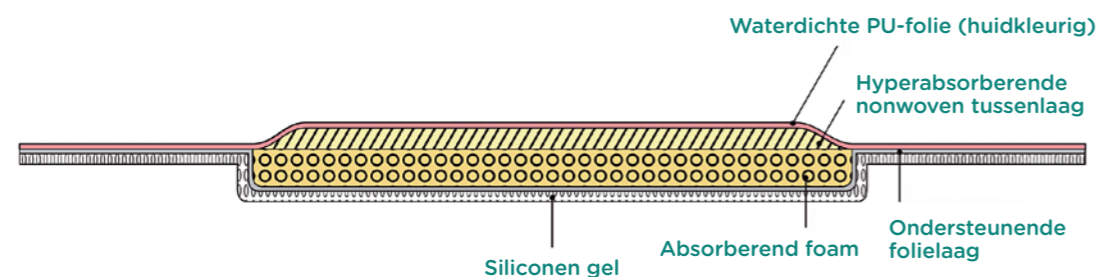

Siliconen kleeflaag

De nieuwe siliconen kleeflaag van Kliniderm foam silicone maakt optimaal contact met het ongelijkmatige oppervlak van de huid en blijft goed contact houden gedurende de volledige draagtijd van het verband. In tegenstelling tot een acrylaat kleeflaag, wordt de siliconen kleeflaag niet sterker na verloop van tijd. De siliconen kleeflaag is daardoor zeer geschikt voor patiënten met een kwetsbare of gevoelige huid. Kliniderm foam silicone schuimverband is atraumatisch en dus pijnloos te verwijderen. Een dunne geperforeerde folielaag vormt de scheiding tussen het schuimverband en de siliconen kleeflaag. Opgenomen wondvocht verspreidt hierdoor beter over het gehele verband.

Polyurethaan schuimlaag

Wondvocht wordt opgenomen in de polyurethaan schuimlaag van het verband en verdampt gedeeltelijk door het schuimverband vanwege de hoge waterdampdoorlaatbaarheid. Dit zorgt voor de hoge absorptiecapaciteit. Het exsudaat wordt in het polyurethaan schuim in het midden van het verband opgenomen en vastgehouden. Dit voorkomt uitdroging van het wondbed en maceratie van de omliggende huid. De totale absorptiecapaciteit van de Kliniderm foam silicone schuimverbanden is 10,7 g/ 10 cm²/ 24 h/ 37°C. Het verband is ook onder compressie (40 mmHg) te gebruiken en het absorbeert dan nog steeds 6,5 g/ 10 cm² / 24 h/ 37°C.


Vochtreulerende laag

De buitenzijde van het schuimverband is verbonden met een waterdamp doorlaatbaar polyurethaan membraan, die een barrière vormt voor vloeistof en micro-organismen. Deze vochtregulerende laag vereenvoudigt snelle verdamping door de folie en ondersteunt zo het behoud van een optimale vochtbalans in de wond. Het verband kan hierdoor langer op de wond blijven.

Functioneel vergelijkbaar

Klinische evaluatierapporten wijzen uit dat Kliniderm foam silicone op het gebied van absorptie en kleefkracht voldoet aan de norm en functioneel vergelijkbaar is met andere producten in de markt. Zorg betaalbaar houden met goede producten, dat is waar wij voor staan.


Waterabsorptie

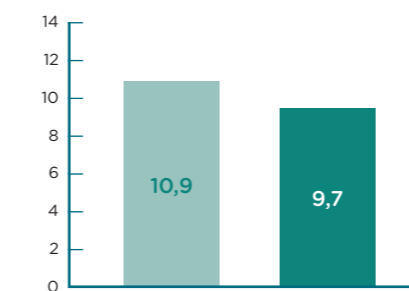

Markleider siliconen schuim

Testmethode: aan een voorbeeld van 5 cm x 5 cm wordt een hoeveelheid opgewarmde testvloeistof (tot 37°C ±1) toegevoegd, corresponderend met 40 x het eigen gewicht gedurende een periode van 30 minuten op 37°C. Daarna wordt de absorptiecapaciteit per gram gewicht van het voorbeeld berekend.

Kleefkracht

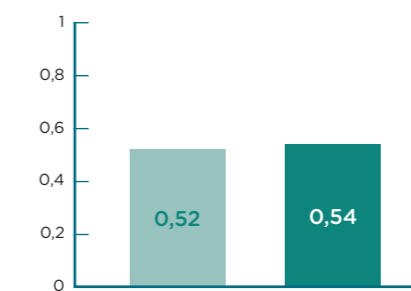

Markleider siliconen schuim

Testmethode: ISO referentie 29862 Methode 1, Meten van kleefkracht van PU folie in een hoek van 180°.

gebruiksaanwijzing kliniderm foam silicone

- 1 Zorg voor het aanbrengen van het verband voor een schoon en droog wondgebied.
- 2 Kies het juiste type siliconenverband afhankelijk van de mate van wondafgifte. Kies de standaardvariant voor matig tot hevig exsuderende wonden en de Lite voor licht exsuderende wonden.
- 3 Het juiste type siliconenverband is afhankelijk van de locatie van de wond. Kies bijvoorbeeld voor lastig te verbinden plaatsen een Border variant. Deze is gemakkelijker aan te brengen en blijft goed zitten.
- 4 Kies een maat verband dat de wond minimaal 2 centimeter overlapt.
- 5 Verwijder de beschermfolie voor gebruik en breng het verband op het wondgebied aan.



Frequentie verbandwisselingen

Het interval tussen de verbandwisselingen hangt normaal gesproken af van de hoeveelheid exsudaat. Het verband mag maximaal 7 dagen in situ blijven. Het kan noodzakelijk zijn het verband eerder te verwisselen wanneer het verloop van de wondgenezing hierom vraagt. Altijd op indicatie van een wondprofessional.