

Uricult


Uricult testen en toebehoren

Toepassing

Uricult is een dipslide methode waarmee bacteriën en gisten in urine worden aangetoond.

Productinformatie

Er zijn 3 soorten Uricult namelijk: Uricult, Uricult Plus en Uricult Trio. Alle drie bevatten een gehele zijde met het CLED medium en aan de andere zijde een gehele of halve zijde met roodbruin MacConkey medium. Het CLED medium is een non-selectief medium waarop alle bacteriën en gisten die een urineweginfectie kunnen veroorzaken groeien. Het MacConkey medium bevat galzouten wat de gram-positieve bacteriën (o.a. S.aureus, S.saprophyticus en E.faecalis) remt waardoor ze niet of slecht groeien op dit medium. Met behulp van deze twee media kan er onderscheid gemaakt worden tussen gram-negatieve en gram-positieve bacteriën.

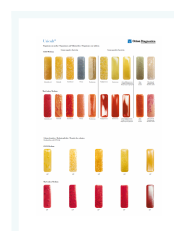

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3015403	URICULT TRIO DIPSLIDE TESTEN 68197	10 st.	50 x 10 st.		
3038710	URICULT DIPSLIDE TESTEN 67404	10 st.	50 x 10 st.		
3015404	URICULT PLUS DIPSLIDE TESTEN 67465	10 st.	1 x 10 st.		
3015405	URICULT BROEDSTOOF CULTURA M 140651	1 st.	1 x 1 st.		
3009014	URICULT THERMOMETER VOOR BROEDSTOOF CULTURA M OD-05724	1 st.	1 x 1 st.		