

Liquiband

Liquiband huidlijm

Toepassing

Liquiband Optima is geschikt voor het sluiten van schone, acute (snij)wonden. Het aanbrengen van Liquiband Optima is pijnloos, snel en gemakkelijk. Pijnbestrijding is niet nodig. Liquiband Optima is in één laag aan te brengen en goed te doseren. Het afdekken van de wond is niet noodzakelijk.


Liquiband Exceed heeft een bredere applicator en kan wonden tot 30cm sluiten.

Productinformatie

- Liquiband Optima is een transparante huidlijm op basis van Octyl blend
- Liquiband Optima kan door de smalle tip ook op de behaarde huid worden toegepast
- De huidlijm dient in één laag aangebracht te worden, waarna de droogtijd slechts 10 seconden is
- Het product bestaat uit een kunststof reservoir met interne glazen ampul en is voorzien van een Flow Control applicatietip
- Met behulp van de knijpvleugels kan veilig de interne glazen ampul gebroken worden, waarna met behulp van de knijpvleugels de lijm zeer gelijkmatig aangebracht kan worden.

Verschillen t.o.v. Klinibond huidlijm:

- Buiten de koelkast te bewaren (18 mnd expiratie)
- Zeer nauwkeurige applicator dmv knijpvleugels
- Flow Control Tip
- Droogtijd

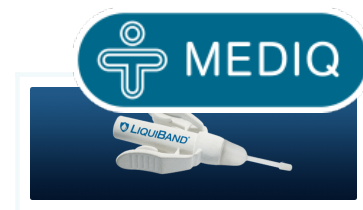

Artikeloverzicht

Bestelnr.	Omschrijving	Binnendoos	Overdoos	ZI-nummer	ZI-memo
3034821	LIQUIBAND OPTIMA APPLICATOR MET FLOW CONTROL 0.50GR OPT 001 STERIEL	10 st.	6 x 10 st.	15994902	
3034822	LIQUIBAND OPTIMA APPLICATOR MET FLOW CONTROL 0.35 GR REF OPT002 *S*	10 st.	6 x 10 st.		